



MANUAL DE USO ALMOHADILLAS TÉRMICAS



"LEER ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO. ANTE LA MENOR DUDA CONSULTAR A SU MÉDICO".

01. PRESENTACIÓN

¡GRACIAS! Por haber elegido una Almohadilla Térmica SILFAB, un producto fabricado íntegramente en Argentina. Silvestrin Fabris S.R.L. desea expresary transmitir su confianza en este producto, desarrollado con materiales de primera calidad, fabricado y controlado con los más altos estándares, brindados a través de un moderno sistema de gestión de la calidad, para productos médicos. Esto permite que hoy usted pueda utilizar con total seguridad este producto.

02. USO PREVISTO

La almohadilla térmica marca SILFAB es un producto cuya finalidad es entregar calor para ser aplicado sobre el cuerpo humano con el fin de aliviar dolores. Puede ser colocada en diversas partes del cuerpo como ser: Zona Lumbar, Zona Cervical, Espalda, Piernas y Hombros. El producto ha sido diseñado para ser utilizado por pacientes de cualquier edad, con excepción de neonatos, bebés, personas inconscientes o con capacidades sensoriales reducidas y/o sensibles al calor. Los entornos indicados para el uso incluyen el hogar, los hospitales y cualquier centro médico.

03. CONTRAINDICACIONES

- La almohadilla no debe ser utilizada por personas con marcapasos. Ante cualquier duda consultar con su médico.
- No utilizar la almohadilla en presencia de mezclas anestésicas inflamables o en ambientes ricos en oxígeno.
- No apta para personas sensibles al calor o con alta sensibilidad al calor.

04. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Este producto NO está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducida capacidad física, sensorial o mental, o por quienes no posean experiencia y/o conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- SIEMPRE debe dejar una cara libre de la almohadilla.
- No utilizar para calefaccionar.
- No sentarse sobre la almohadilla.
- No acostarse sobre la almohadilla.
- No utilizar la almohadilla colocándola entre el cuerpo y un respaldo o superficie que no deje una cara de esta al descubierto.
- No insertar alfileres ni agujas para sujetarla.
- No sumergir ni lavar el producto.
- No utilizar si alguna de las partes se encuentra rota o visiblemente deteriorada.

Para prevenir quemaduras:

- No utilizar mientras duerme.
- No utilizar en bebés o personas insensibles al calor.
- No plegarla ni retorcerla durante su uso.
- No dejar la almohadilla sola o desatendida mientras se encuentra encendida.
- No utilizar en presencia de mezclas anestésicas inflamables.
- No utilizar sin la funda de tela.
- No utilizar dentro de la cama.
- No utilizar entre la ropa y el cuerpo.

Para evitar recibir una descarga eléctrica:

- No utilizar convertidores de tensión. Verificar que la tensión de alimentación del producto corresponda con lo especificado en el punto Características Técnicas de este manual.
- No intentar abrir ni desarmar el conjunto térmico de la almohadilla.
- No usar cables prolongadores.
- No dejar el producto conectado a la red eléctrica al alcance de los niños.
- No accionar la llave con las manos mojadas.
- No utilizar si la funda de tela está húmeda o mojada o lo estuviera el usuario.

Para no sufrir otros perjuicios físicos (contagios, infecciones, tratamientos inadecuados):

- No utilizar la almohadilla para otro fin que el descrito en este manual. Ante cualquier duda consulte a su médico.
- No utilizar la almohadilla sobre piel sensible o en zonas en la cual presenta irritación o lastimaduras.

05. DESCRIPCIÓN

La Almohadilla Térmica es un producto alimentado eléctricamente por corriente alterna la cual, por medio de una resistencia y un termostato de seguridad entrega calor controlado.

Algunas de sus principales características son:

- Termostato de seguridad.
- Dos niveles de temperatura.
- Doble capa de aislación (Goma espuma y Poliéster no tejido).
- Capa impermeable.
- Funda desmontable de tela Cool frizado, respirable y confortable.
- Llave de doble corte.
- Novedoso sistema de CALENTAMIENTO PROTEGIDO.



- Todas las partes componentes son requeridas para el correcto funcionamiento del producto.
- No usar ningún otro accesorio que no haya sido adquirido al fabricante.
- Los materiales que entran en contacto con el paciente o usuario son no tóxicos.

06. LISTADO DE MODELOS

SMALL 20 x 31 cm



LARGE 28 x 41 cm




CERVICAL 21 x 46 cm



CINTURA 25 x 52 cm



06.1 LISTADO DE COMPONENTES

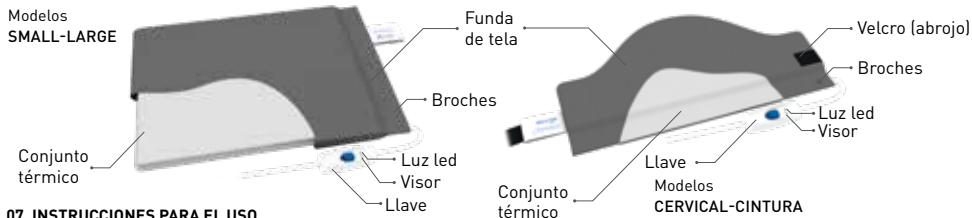

07. INSTRUCCIONES PARA EL USO

⚠ IMPORTANTE

- Antes de utilizar el producto, verificar que el conjunto térmico NO presente pliegues ni dobleces. Para ello, introduzca la mano en el interior de la funda y pase la palma por toda la superficie del conjunto térmico. De encontrar situaciones como las mencionadas, intente quitarlas y de no poder hacerlo, contáctenos.

- No utilizar sin la funda de tela.

- No utilizar si la funda de tela está húmeda o mojada.

- Realizar aplicaciones de no más de 20 minutos.

A. Conectar la almohadilla a la red de energía eléctrica.

B. Encender la almohadilla deslizando la llave a la posición 1 o 2, la luz led se encenderá. Se podrá observar en el visor el nivel de temperatura seleccionado.



POSICIÓN 1
Nivel mínimo
(48°C)



POSICIÓN 2
Nivel máximo
(50°C-60°C)

⚠ Temperatura máxima establecida por normativa vigente.


C. Colocar la almohadilla sobre la parte del cuerpo que requiera tratamiento, según la aplicación recomendada para cada modelo y la indicación médica.

D. Una vez finalizada la aplicación apagar la almohadilla desde la llave interruptora (Posición 0) y desconectar de la red de energía eléctrica.

07.1 APLICACIONES RECOMENDADAS


· SMALL ·

Hombros, brazos, muñecas, etc.

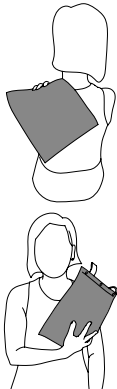


· LARGE ·

Brazos, piernas, espalda, etc.

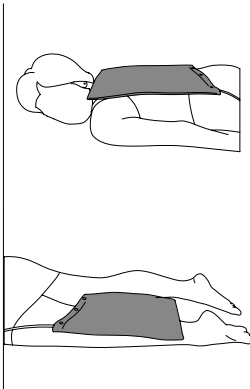


· CERVICAL ·

Zona cervical.

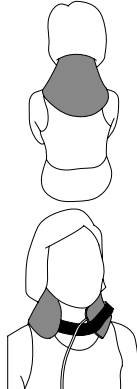




· CINTURA ·

Zona lumbar.

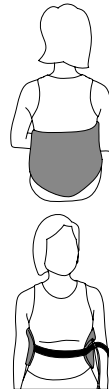

07.2 USO CORRECTO E INCORRECTO

⚠ IMPORTANTE: Durante su uso una de las caras de la almohadilla debe permanecer libre. Ejemplo: Almohadilla modelo CINTURA.

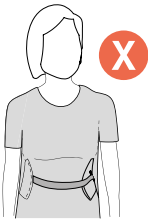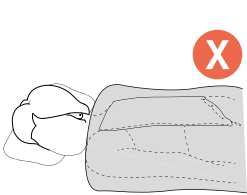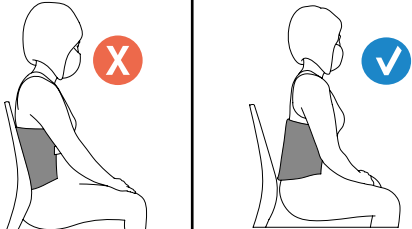USO INCORRECTO		USO CORRECTO
		
NO UTILIZAR ENTRE LA ROPA EL CUERPO	NO UTILIZAR MIENTRAS DUERME, DENTRO DE LA CAMA NI PARA CALEFACCIONAR	SIEMPRE DEJAR UNA CARA LIBRE

08. INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA

- A - Desconectar la almohadilla de la red de energía eléctrica, desenchufando la ficha del toma corriente.
- B - Desprender uno a uno, los botones (broches) de la funda desmontable, luego retirar el conjunto térmico.
- C - Utilizar un paño suave para reparar las superficies de la llave interruptora, el conjunto térmico y el cable.
- D - Lavar a mano la funda desmontable, con agua fría (temperatura menor a 30°C) y jabón neutro.
- E - Enjuagar y secar la funda al aire libre.

NOTA: El uso excesivo y/o prolongado de producto limpiador puede disminuir la vida útil de la tela.

⚠ IMPORTANTE

- No lavar en lavarropas.
- No lavar o limpiar con hipoclorito de sodio (lavandina).
- No secar en secadoras o secarropas, ni planchar.
- Nunca sumergir el conjunto térmico en agua.

11. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

FALLA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
La luz led no enciende cuando la llave esta en posición 1 y 2.	Falta de energía eléctrica.	Verificar la existencia de energía eléctrica.
	Mal conectado a la red eléctrica.	Verificar la conexión.
	Desperfecto eléctrico.	Contactar con un Servicio Técnico Oficial.
La almohadilla no calienta.	La llave se encuentra en la posición 0.	Verificar que la llave se encuentre en la posición 1 o 2.
	Desperfecto eléctrico.	Contactar a un Servicio Técnico Oficial.
La almohadilla calienta en exceso o no es confortable.	Falta colocar la funda de tela.	Coloque la funda de tela.
	Desperfecto eléctrico.	Contactar con un Servicio Técnico Oficial.

Conjunto térmico con dobleces.	Dobles causado por una mala colocación del conjunto térmico dentro de la funda de tela.	Si al pasar la palma de la mano por la superficie esta queda con dobleces. Contactar con un Servicio Técnico Oficial.
--------------------------------	---	---

09. MANTENIMIENTO

- Si alguno de los componentes se encuentra dañado, hacerlo reemplazar por un Servicio Técnico Oficial (STO).
- En caso de sospechar del incorrecto funcionamiento del producto, es recomendable acercarlo a alguno de los STO, para su verificación.
- El tiempo de vida útil estimado de este producto, basado en la disponibilidad de sus repuestos, ha sido establecido en 5 años a partir de la fecha de su fabricación.

10. DESCARTE DEL PRODUCTO

No desechar este producto de la misma forma que lo haría con los residuos generales de su hogar. Para evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, reciclarla responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.

Para su descarte consultar las reglamentaciones vigentes en su región y/o en su defecto la reglamentación del centro de salud al cual pertenece.

12. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación 220 V ~ 50 Hz.
Potencia 50 W.
Productos TIPO B.
Clase II.

CONDICIONES AMBIENTALES	USO	ALMACENAMIENTO
TEMPERATURA AMBIENTE	5 A 40 °C	-10 A 50 °C
HUMEDAD AMBIENTE	30 A 95 %	10 A 95 %
PRESIÓN AMBIENTE	700 A 1060 hPa	500 A 1060 hPa

13. DEFINICIÓN DE SÍMBOLOS

 Equipo clase II.	 Este lado arriba.	 Límites de temperatura.
 Corriente alterna.	 Frágil. Manipúlese con cuidado.	 Código de catálogo.
 Advertencia.	 Manténgase seco y protegido de la humedad.	 Lote.
 Año de fabricación.	 No apilar más de "n" cajas.	 Número de serie.
 Datos del fabricante.	 Límites de humedad.	 Es obligatorio leer el manual de instrucciones.
 No desechar con la basura doméstica.	 Límites de presión atmosférica.	 Parte aplicable tipo B.
 No planchar.	 Lavar a mano (30°C).	 No retorcer.

14. GARANTÍA

SILVESTRIN FABRIS S.R.L. garantiza:

- La atención de este producto por el término de un (1) año, a partir de la compra por el usuario, haciéndose responsable de reparar y/o cambiar cualquier pieza que muestre fallas en condiciones normales de funcionamiento, o presente cualquier defecto de fabricación.
- Que este producto, cumple con las normativas de la ANMAT vigentes en la Argentina.

Esta garantía caduca si:

- El producto evidencia golpes, roturas, caídas, rayaduras o cualquier daño no atribuible al desgaste natural en el uso.
- El producto recibe un trato inadecuado.
- No se cumple con las pautas de uso, limpieza y mantenimiento indicadas en el manual de uso.
- Se evidencia intento de reparación o desarmado del producto por personas no autorizadas.
- El producto es conectado a circuitos que operan con sobretensión o baja tensión o cualquier variación de energía que produzca funcionamiento en condiciones anormales.
- Si es conectado a una red de alimentación distinta de la indicada en las características del producto.
- La garantía no está sellada y no es acompañada de la factura de compra.
- Se observan enmiendas o raspaduras en el certificado de garantía y/o la factura de compra.
- El modelo adquirido es inadecuado o su uso es ajeno al destinado.

IMPORTANTE: Este producto, es clasificado como clase II según los requisitos de la norma IEC 60601-1. SILVESTRIN FABRIS S.R.L. deslinda toda responsabilidad, que el mismo pudiera ocasionar a personas por deficiencias en la instalación eléctrica del usuario.

Almohadillas Térmicas

Modelos: SMALL, LARGE, CERVICAL, CINTURA Marca SILFAB.
Productos Autorizados por la ANMAT PM-97-31
Director técnico: Bioing. Diego Fontana.
Matrícula COPITEC: 5611.

Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas.
Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso.
AG-MUAL2 v04 | Última revisión: diciembre 2023

 **SILVESTRIN FABRIS S.R.L. INDUSTRIA ARGENTINA**
♦ Av. Del Barco Centenera 3481 (C1437ACG) C.A.B.A. Argentina.
☎ (54-11) 5368-2525
✉ info@silfab.com.ar | 🌐 www.silfab.com.ar
USO SIN PRESCRIPCIÓN.

CALIDAD RESPALDADA
por certificación
ISO 13485

Autorizado por



/SILFAB

¡Yo, elijo SILFAB!

